

国家标准物质 (NCRM)

标准物质编号: GBW(E) 090073~GBW(E) 090076

标准物质证书

Reference Material Certificate

丙型肝炎病毒抗体 (HCV Ab) 系列血清 (液体) 标准物质

批次编号: 202603

Batch Number

定值日期: 2026 年 01 月 30 日

Certification Date

有效期至: 2028 年 01 月 12 日

Period of Validity

研制 (生产) 单位: 北京康彻思坦生物技术有限公司 (盖章)

Reference Material Producer

单位地址: 北京市昌平区科学园路 31 号 1 号楼

Address

联系电话: 010-80720035

Telephone

电子邮箱: beijingcs@beijingcs.com

Email

版本号: 2.4

Version

北京康彻思坦生物技术有限公司

质量管理专用章

1 概述

本标准物质由用酶联免疫吸附试验 (ELISA) 方法筛选滴度不低于 1:2000 的抗-HCV 强阳性血清 (浆), 采用 60°C 加热 1h 进行灭活处理制备成原料, 再含有 40% 牛血清及防腐剂 Proclin-300 的 0.02M PH7.4 磷酸盐缓冲液为基质液对原料按照相应的使用比例进行稀释, 充分混匀, 除菌过滤后进行分装及包装。

本标准物质包含 4 个浓度, 4 个浓度分别包装。

2 预期用途

本标准物质适用于实验室进行 HCV Ab 检测的量值溯源、传递、室内质量控制、实验室能力验证等。

3 特性量值、标准值和不确定度

分别采用特异性、精密度、灵敏度相对较好的 5 家公司 (北京万泰生物药业股份有限公司、上海实业科华生物技术有限公司、厦门英科新创科技有限公司、北京华大吉比爱生物技术有限公司、北京金豪制药有限公司) 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒对本系列标准物质进行检测, 与卫生部临检中心研制的标准物质 (编号 GBW 09160) 进行比对, 确定其含量 (单位 NCU/mL)。

不确定度来源由五部分组成: 第一部分为不均匀性引起的不确定度; 第二部分为制备物的稳定性引起的不确定度; 第三部分为分析测定的不确定度; 第四部分为标准曲线引起的不确定度; 第五部分为稀释过程引起的不确定度。

定值结果见下表:

产品简称	编号	HCV Ab 标准值 (NCU/mL)	不确定度
HCV Ab 标准物质 1NCU/mL	GBW(E) 090073	0.99	0.10
HCV Ab 标准物质 2NCU/mL	GBW(E) 090074	2.00	0.30
HCV Ab 标准物质 4NCU/mL	GBW(E) 090075	4.04	0.08
HCV Ab 标准物质 8NCU/mL	GBW(E) 090076	8.0	1.1

4 计量的溯源性

本标准物质根据 GB/T 21415-2008/ISO17511: 2003《体外诊断医疗器械 生物样品中量的测量校准品和控制物质赋值的计量学溯源性》规定中图 5, 选用下面溯源图溯源至卫生部临检中心研制的丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV) 血清标准物质 [编号 GBW09160]。

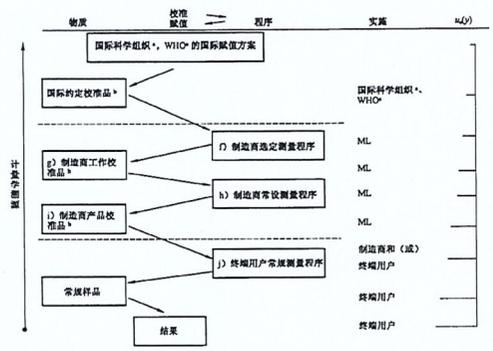


图5 校准等级和无国际约定参考测量程序、向非一级国际约定校准品的计量溯源

5 定值测量的方法

采用5家公司的丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒进行检测，溯源至卫生部临检中心标准物质（编号GBW09160），用其进行标定，确定所制备标准物质的含量。

6 最小取样量

总体单元数 N	抽取单元数
$N \leq 200$	≥ 11
$200 < N \leq 500$	≥ 15
$500 < N \leq 1000$	≥ 25
$N > 1000$	≥ 30

7 有效期

- 1) 室温（20~25℃，相对湿度20~50%）可稳定4周；
- 2) 高温高湿度（37℃，相对湿度60-80%）条件下，可稳定3天；
- 3) -15℃以下可稳定2年。

8 互换性

采用5家检测试剂进行互换性评价，本标准物质与20份临床标本在5家试剂间具有符合要求的互换性。

9 运输和贮存条件

本标准物质未开封可保存于-15℃以下。

标准物质需冷藏运输。

10 使用说明

本标准物质仅用于体外诊断试剂。

标准物质应按血清（浆）样本对待进行检测。不能用于阴阳性结果的判断标准。

使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；如果当日未用完且无污染，可保存在2-8℃，但建议在1周内用完；此外，应避免反复冻融和重新分装。

11 标准物质研制机构名称和联系方式

研制单位：北京康彻思坦生物技术有限公司
 单位地址：北京市昌平区科学园路31号1号楼
 电话：010-80720035
 传真：010-89705849
 电子邮箱：beijingcs@beijingcs.com
 网址：http://www.beijingcs.com/

12 健康和安全性信息

本标准物质应视为有潜在生物传染性样本对待。使用时遵循生物安全规则，并根据规定对废弃物进行处理。